

纯钛肋骨板（无菌包装）


Pure Titanium Rib Plate (Sterile Packaging)



关于专利 About Patent



关于注册证 About Registration Certificate

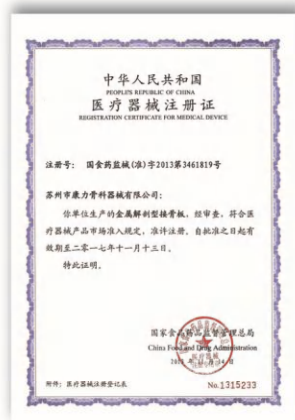

医疗器械注册登记表	
注册号: 国食药监械(注)字2013第3461819号	
生产企业名称	苏州康力骨科器械有限公司
企业注册地址	江苏省苏州市吴江区盛泽镇中沙路18号
生产地址	江苏省苏州市吴江区盛泽镇中沙路18号
产品名称	金属解剖型肋骨板
型号、规格	见附表
产品标准	YB/T 09-4198-2013《金属解剖型肋骨板》
产品规格结构图	该产品注册名称为YB/T 09-4198-2013《金属解剖型肋骨板》
产品适用范围	该产品用于骨科手术中肋骨骨折复位、固定、支撑、塑形、牵引等内固定治疗。
产品禁忌症	见说明书
备注	

肋骨接骨板(无菌包装) T151 Rib Plate (Sterile Packaging)



纯钛肋骨板（无菌包装）

Pure Titanium Rib Plate (Sterile Packaging)

系统特点

Character Of The System

- 微创植入，各部位专用施夹钳固定，操作简单。
- 纯钛材质轻，生物相容性好，不含铁离子，不影响胸部CT、MRI检查，术后无需取出。柔型固定，不压迫肋间神经。
- Minimally invasive implant, each part is fixed with clamp, easy operation
- The pure titanium has a light weight and good biocompatibility. It doesn't contain ferric ion and won't affect CT & MRI examination. Besides, this flexible immobilization doesn't oppress intercostals nerve and the implant needn't be removed out after the operation.

适应症

Indications


- 适用浮动胸壁的内固定以及明显错位的单发或多发性肋骨骨折内固定。
- 可定制用于肋骨肿瘤切除术后的肋骨重建。
- 亦可用于开胸断肋后肋骨的对接。
- It is used to the fixation for floating chest wall and obvious dislocation of single or multiple ribs fractures.
- It can be customized to be used for the reconstruction of ribs after the rib tumor resection.
- It can also be used to the bone-setting after the thoracotomy.

注意事项

Matters Deeding Attention

- 使用前必须对非无菌包装肋骨接骨板及施加钳常规消毒处理。
- 术中不必切开肋骨骨膜，不必移开肋间神经。
- 创面必须严密止血，或放置硅球引流。
- 常规胸腔闭式引流。
- Common sterilization on non-sterile packaging rib plate and clip applicator prior to use.
- Don't need cut the rib periosteum or remove the intercostals nerve.
- Hemostasis and drainage should be done completely during operative process.
- Adopting the closed thoracic drainage.

肋骨接骨板 T132 Rib Plate

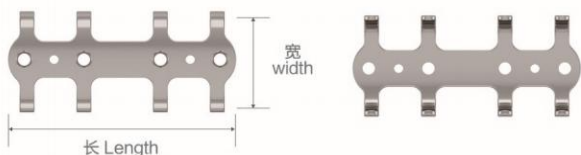

产品名称 Product Name	包装形式 Packaging From	材质 Material	宽度(mm) Width	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
肋骨接骨板 Rib Plate	洁净包装 Clean Packaging	纯钛 Pure Titanium	11	49	T1321149
			15	34	T1321534
			15	49	T1321545
			15	59	T1321559
			19	34	T1321934
			19	49	T1321949
肋骨接骨板 Rib Plate	无菌包装 Sterile Packaging	纯钛 Pure Titanium	11	49	T1321149-S
			15	34	T1321534-S
			15	49	T1321545-S
			15	59	T1321559-S
			19	34	T1321934-S
			19	49	T1321949-S
			19	59	T1321959-S

配套器械

Supporting Instruments

