

中空无头加压螺钉系统

Headless Cannulated Compression Screw System



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
中空无头加压螺钉 Headless Cannulated Compression Screw	钛合金 Titanium Alloy	Φ2.5	8、10、12、 14、16、18、 20、22、24、 26、28、30	T5702508- T5702530
		Φ3.5	20、22、24、 26、28、30、 32、34、36、 38、40	T5703520- T5703540
		Φ4.5	30、32、34、 36、38、40、 42、44、46、 48、50、52、 54、56、58、 60	T5704530- T5704560

- 中空设计，提高经皮植入的准确性。
- 变螺距螺纹和锥度设计，螺距有大变小，头部进入骨质的速度比尾部大，从而螺钉拧入时，对骨折面进行加压。
- 全螺纹设计，在受到周期性负载时能更好地保持加压功能。
- 无头设计，在关节区域使用中，减少碰撞以及对软组织的刺激。
- Hollow design, improve the accuracy of the percutaneous implant.
- Variable pitch thread and taper design pitch from big to small, the speed of the head into the bone quicker than the speed of the tail, when the screw is implanted, the fracture surface is well pressured.
- Full threaded design, better keep the pressure function when receiving periodic load.
- Headless design, tp reduce collisions and stimulation to the solf tissue in the joint area in use.

中空双头加压螺钉系统

Counter Sink Cannulated Compression Screw System

Φ2.5中空双头加压螺钉阳极氧化 33501

Φ2.5Counter Sink Cannulated Compression Screw



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
中空双头 加压螺钉 Counter Sink Cannulated Compression Screw	钛合金 Titanium Alloy	Φ 2.5	10	33501010
			12	33501012
			14	33501014
			16	33501016
			18	33501018
			20	33501020
			22	33501022
			24	33501024
			26	33501026
			28	33501028
			30	33501030

Φ3.0中空双头加压螺钉 T5503

Φ3.0Counter Sink Cannulated Compression Screw



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
中空双头 加压螺钉 Counter Sink Cannulated Compression Screw	钛合金 Titanium Alloy	Φ 3.0	14	T5503014
			16	T5503016
			18	T5503018
			20	T5503020
			22	T5503022
			24	T5503024
			26	T5503026
			28	T5503028
			30	T5503030
			32	T5503032
			34	T5503034
			36	T5503036
			38	T5503038
			40	T5503040

Φ4.0中空双头加压螺钉 T5504

Φ4.0Counter Sink Cannulated Compression Screw



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
中空双头 加压螺钉 Counter Sink Cannulated Compression Screw	钛合金 Titanium Alloy	Φ 4.0	26	T5504026
			28	T5504028
			30	T5504030
			32	T5504032
			34	T5504034
			36	T5504036
			38	T5504038
			40	T5504040
			42	T5504042
			44	T5504044
			46	T5504046
			48	T5504048
			50	T5504050

中空加压螺钉系列

Cannulated Compression Screw Series

中空加压螺钉(Φ3.5) T551

Cannulated Compression Screw(Φ3.5)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
中空加压螺钉 Cannulated Compression Screw	钛合金 Titanium Alloy	Φ3.5	20、22、24、 26、28、30、 32、34、36、 38、40	T5513520- T5513540

中空加压螺钉(Φ4.0) T552

Cannulated Compression Screw(Φ4.0)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
中空加压螺钉 Cannulated Compression Screw	钛合金 Titanium Alloy	Φ4.0	26、28、30、 32、34、36、 38、40、42、 44、46、48、 50	T5524026- T5524050

中空加压螺钉(Φ4.5) T553

Cannulated Compression Screw(Φ4.5)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
中空加压螺钉 Cannulated Compression Screw	钛合金 Titanium Alloy	Φ4.5	24、26、28、 30、32、34、 36、38、40、 42、44、46、 48、50、52、 54、56、58、 60	T5534524- T5534560

股骨颈空心加压螺钉(Φ6.5) T562

Femoral Neck Cannulated Compression Screw(Φ6.5)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
股骨颈空心 加压螺钉 Femoral Neck Cannulated Compression Screw	钛合金 Titanium Alloy	Φ6.5	60、65、70、 75、80、85、 90、95、100、 105	T56265060- T56265105

备注：适用于股骨颈偏小患者
Note: apply to the patient of smaller femur

股骨颈空心加压螺钉(Φ7.3) T563

Femoral Neck Cannulated Compression Screw(Φ7.3)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
股骨颈空心 加压螺钉 Femoral Neck Cannulated Compression Screw	钛合金 Titanium Alloy	Φ7.3	60、65、70、 75、80、85、 90、95、100、 105、110、115	T56373060- T56373115

双头空心加压螺钉(Φ6.5) T561

Dual Ends Cannulated Compression Screw(Φ6.5)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
双头空心加压螺钉 Dual Ends Cannulated Compression Screw	钛合金 Titanium Alloy	Φ6.5	65、70、75、 80、85、90、 95、100、105、 110、115	T56165065- T56165115

无菌 中空加压螺钉系列

Cannulated Compression Screw Series (Sterile)

无菌 $\Phi 2.5$ 中空双头加压螺钉 35050

Counter Sink Cannulated Compression Screw (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌中空双头加压螺钉 Counter Sink Cannulated Compression Screw (Sterile)	钛合金 Titanium Alloy	$\Phi 2.5$	10-30 (每2mm为一档) The specification is 2mm)	35050010- 35050030

无菌 $\Phi 3.0$ 中空双头加压螺钉 35051

Counter Sink Cannulated Compression Screw (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌中空双头加压螺钉 Counter Sink Cannulated Compression Screw (Sterile)	钛合金 Titanium Alloy	$\Phi 3.0$	14-40 (每2mm为一档) The specification is 2mm)	35051014- 35051040

无菌 $\Phi 4.0$ 中空双头加压螺钉 35052

Counter Sink Cannulated Compression Screw (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌中空双头加压螺钉 Counter Sink Cannulated Compression Screw (Sterile)	钛合金 Titanium Alloy	$\Phi 4.0$	26-50 (每2mm为一档) The specification is 2mm)	35052026- 35052050

无菌 $\Phi 2.5$ 中空无头加压螺钉 35058

Headless Cannulated Compression Screw (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌中空无头加压螺钉 Headless Cannulated Compression Screw (Sterile)	钛合金 Titanium Alloy	$\Phi 2.5$	8-30 (每2mm为一档) The specification is 2mm)	35058008- 35058030

无菌 $\Phi 3.5$ 中空无头加压螺钉 35059

Headless Cannulated Compression Screw (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌中空无头加压螺钉 Headless Cannulated Compression Screw (Sterile)	钛合金 Titanium Alloy	$\Phi 3.5$	20-50 (每2mm为一档) The specification is 2mm)	35059020- 35059050

无菌 $\Phi 4.5$ 中空无头加压螺钉 35060

Headless Cannulated Compression Screw (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌中空无头加压螺钉 Headless Cannulated Compression Screw (Sterile)	钛合金 Titanium Alloy	$\Phi 4.5$	30-60 (每2mm为一档) The specification is 2mm)	35060030- 35060060

无菌 中空加压螺钉系列

Cannulated Compression Screw Series (Sterile)

无菌 $\Phi 3.5$ 中空加压螺钉 35053

Cannulated Compression Screw (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌中空加压螺钉 Cannulated Compression Screw (Sterile)	钛合金 Titanium Alloy	$\Phi 3.5$	20-60 (每2mm为一档) The specification is 2mm)	35053020- 35053060

无菌 $\Phi 4.0$ 中空加压螺钉 35054

Cannulated Compression Screw (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌中空加压螺钉 Cannulated Compression Screw (Sterile)	钛合金 Titanium Alloy	$\Phi 4.0$	26-60 (每2mm为一档) The specification is 2mm)	35054026- 35054060

无菌 $\Phi 4.5$ 中空加压螺钉 35055

Cannulated Compression Screw (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌中空加压螺钉 Cannulated Compression Screw (Sterile)	钛合金 Titanium Alloy	$\Phi 4.5$	24-60 (每2mm为一档) The specification is 2mm)	35055024- 35055060

无菌 $\Phi 6.5$ 股骨颈空心加压螺钉 35056

Femoral Neck Cannulated Compression Screw (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌股骨颈空心 加压螺钉 Femoral Neck Cannulated Compression Screw (Sterile)	钛合金 Titanium Alloy	$\Phi 6.5$	60-110 (每5mm为一档) The specification is 5mm)	35056060- 35056110
备注: 适用于股骨颈偏小患者 Note: apply to the patient of smaller femur				

无菌 $\Phi 7.3$ 股骨颈空心加压螺钉 35057


Femoral Neck Cannulated Compression Screw (Sterile)



产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
无菌股骨颈空心 加压螺钉 Femoral Neck Cannulated Compression Screw (Sterile)	钛合金 Titanium Alloy	$\Phi 7.3$	60-115 (每5mm为一档) The specification is 5mm)	35057060- 35057115

Φ2.0、Φ2.5 自攻自钻螺钉系统

Φ2.0、Φ2.5 Self-tapping & Drilling Screw System

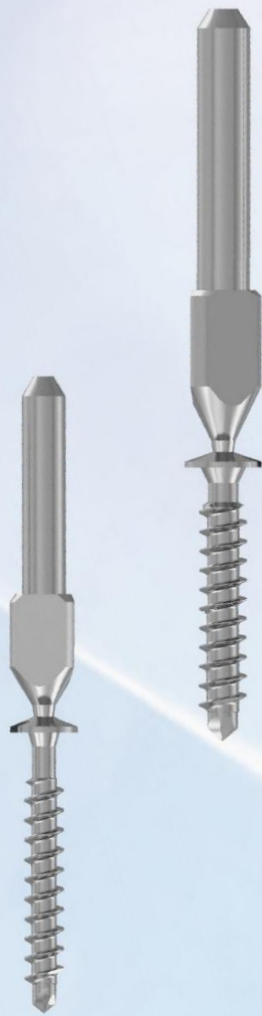

产品名称 Product Name	材质 Material	直径(mm) Diameter	长度(mm) Length	产品编号 Product No.
自攻自钻螺钉 Self-tapping & Drilling Screw	钛合金 Titanium Alloy	Φ2.0	11、12、13、 14、15、16、 18、20	T5012011~ T5012020
		Φ2.5	11、12、13、 14、15、16、 18、20、22	T5012511~ T5012522

适用范围：
手指骨折
创伤撕裂
趾骨，跖骨骨折

Usable range:
Fracture of the maniphalanx
Avulsion of trauma
Fracture of phalange